


特徴


- 扁平・陥没乳頭を引き出し、ほ乳しやすいカタチに。
- 柔らか素材のシリコンゴム製。
- 乳頭部の押し方で吸引圧の調節ができます。
- 吸引圧による変形を防ぐ、変形防止リング付き。
- 保管ケース付き。
※保管ケースは消毒ケースとしても使えます。

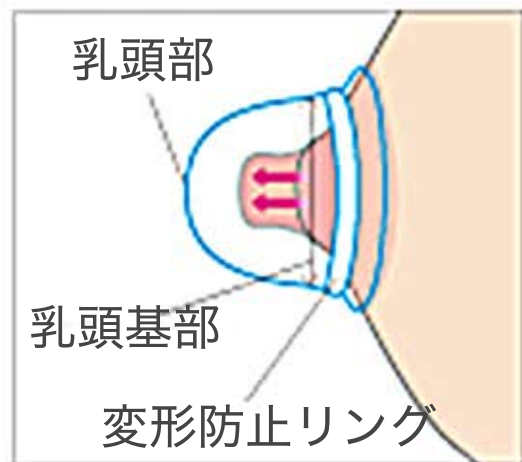


使い方

妊娠中にご使用の場合は必ず専門医・助産師の指導のもとでご使用ください。


皮膚への保湿とやわらかさ、伸びをよくするために、装着部位に保湿クリーム等を塗布してご使用ください。吸着効果を高める働きもあります。入浴時ははずして、痛くない程度に乳頭のマッサージを行ってください。

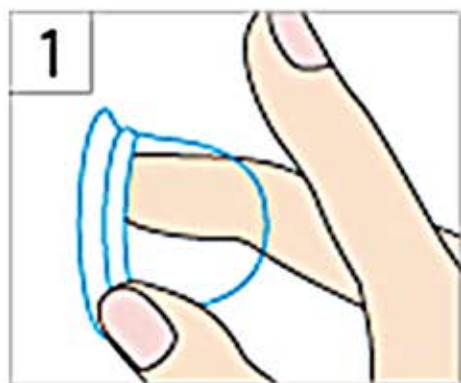

1 親指と中指でリングを掴みます。

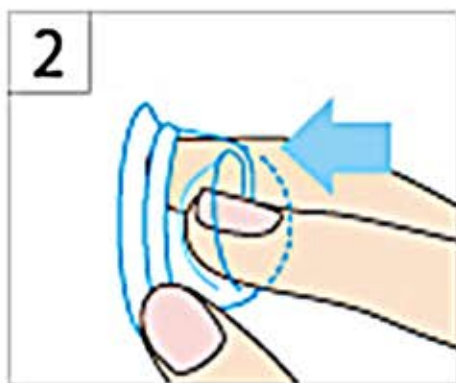


2 人差し指で乳頭部を押してください。

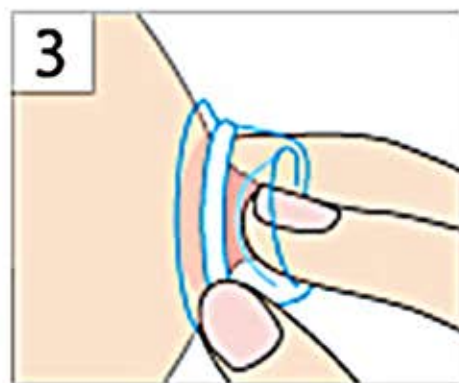

3 乳頭に密着させ人差し指をゆっくり離します

吸引力の調節

浅く押し込めば圧力が弱くなり、深く押し込めば圧力が強くなります。

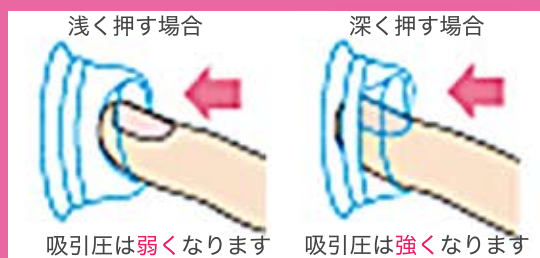

【ご注意事項】

装着開始の3日間くらいは数分毎に乳頭の状態を観察しながら装着してください。肌に痛みやうっ血がみられた際は、すぐに使用を中止し専門医か助産師にご相談ください。無理に装着すると肌トラブルの原因となります。妊娠中にご使用の場合は必ず専門医・助産師の指導のもとでご使用ください。妊娠中の方は、妊娠前期は使用を控え、安定期に入ってからご使用ください。また、本器の使用、乳頭のマッサージ中に腹部に痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず専門医か助産師にご相談ください。授乳期のご使用の際は、安全のため消毒を必ず行い、乳頭を清潔に保ってください。乳頭に傷や亀裂のある方や、肌に異常を感じた方は、使用を控えてください。お肌の弱い方は、うっ血して赤くなる場合があります。そのような場合は、吸引力を弱くしてお試しいただくか、使用をお控えください。体液がにじみ出したり、痛みがともなうような無理な吸引は絶対にしないでください。シリコンカップは爪を立てると破れるおそれがありますのでご注意ください。シリコンカップは保湿クリームを塗布したり、長期間使用すると変色することがありますが、品質には問題ありません。この器具は乳頭を引き出す目的以外には使用しないでください。子どもの手の届かない場所に保管してください。火の近くに放置しないでください。